

多機能コンパクトフットマッサージャー YT-806



もくじ

安全にお使いいただくために	1～4
使用目的または効果	4
各部のなまえとはたらき	5～6
ご使用の前に	7
使いかた	8～9
着脱カバーの取り付け・取り外し	10
お手入れ	11
使用しないときは	11
故障かな？と思ったら	12
仕様	13
保証書	裏表紙

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。特に「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

●本製品は、一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。

安全にお使いいただくために

ご使用になる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を示しています。

 警告	死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。	 注意	損害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
---	--------------------------	---	---------------------------------

●お守りいただく内容を図記号で示しています。

	禁止を示す記号		強制・指示を示す記号
---	---------	---	------------

使用者の体調に関する注意

警告

次の人は使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人

例：血栓〔塞(そく)栓〕症・重度の動脈瘤(りゅう)
・急性静脈瘤(りゅう)・各種皮膚炎および皮膚感
染症(皮下組織の炎症を含む)など
症状を悪化させるおそれがあります。



禁止

自分で意思表示ができない人や、身体の不自
由な人には使用させない。

事故やけがのおそれがあります。

幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわ
りで遊ばせない。

けがや故障のおそれがあります。

足のマッサージ以外の目的で使用しない。
(とくに頭や首には使用しない)また足を入
れたまま立ったり、本体の上に座ったりしない。

事故やけが、故障の原因になります。



必ず守る

本製品の使用時間は1回15分以内にする。
同一箇所への連続使用をさける。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故や
けが、または体調不良をおこすおそれがあります。ま
た低温やけどのおそれがあります。

医師の治療を受けているときや、下記の人は
必ず医師と相談のうえ使用する。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けや
すい体内植込型医用電気機器を使用している人
 - ・悪性腫瘍のある人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・温度感覚喪失が認められる人
 - ・妊娠中の人、または出産直後の人
 - ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害か
らくる知覚障害のある人
 - ・治療部位に創傷のある人
 - ・安静を必要とする人
 - ・体温38℃以上(有熱期)の人
 - 【例：急性炎症症状(けん急感、悪寒、血圧変動な
ど)の強いときや、衰弱しているとき】
 - ・骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉離
れなど急性疼痛(とう)痛性疾患の人
 - ・低温やけどをしたことのある人
 - ・腱鞘(けんしょう)炎の人
 - ・上記以外に身体に特に異常を感じている人
- 事故や体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

注意



必ず守る

使用中に身体に異常があらわれたり、感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。

そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

他の治療器との併用はしない。また一人用機器のため複数の人が同時に使用しない。
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しない。
けがや低温やけどをおこすおそれがあります。

使用に関する注意

⚠ 警告

ご使用の前に、必ず本体布カバーと着脱カバーが外れていないか、破れていないか確認し、外れたり破れた状態では使用しない。
どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、AC アダプターを抜き、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に修理を依頼する。
事故やけが、低温やけどの原因になります。

電源は交流(AC)100V を使用する。
また付属の AC アダプター以外は使用しない。
(型式：IVP1200-2000P)
守らないと、感電・火災・ショートの原因になります。



必ず守る

他製品に付属の AC アダプターを使用しない。
AC アダプターの故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。

AC アダプターの電源プラグや DC プラグは容易に着脱しないように根元まで確実に差し込む。
また、たこ足配線はしない。
感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグのホコリなどは定期的にとる。
ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。



電源プラグを抜く

AC アダプターをコンセントから抜くときは、コード部を持たずに、必ず AC アダプター本体を持って引き抜く。

電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



禁止

絶対に分解・改造・修理をしない。
感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。
また身体がぬれた状態で使用しない。
感電のおそれがあります。

AC アダプターの取り扱いについては下記の項目に注意する。

- ・傷つけたり、破損させたりしない
 - ・加工しない
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らない
 - ・使用時には束ねない
 - ・重いものを載せない
 - ・挟みこまない
 - ・本体に巻きつけない
 - ・コンセントへの電源プラグの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



禁止

ヒーターを使用するときは、同じ部位に長時間触れないようにする。
また熱に敏感でない人はやけどのおそれがあるため、十分注意して使用する。
低温やけどのおそれがあります。

施療部位に装飾品をつけて使用しない。
機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。

使用中に足を入れた状態で立ち上がったたり、歩いたりしない。
本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。



禁止

本製品の上に立ったり、座ったりしない。
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子様が遊んだりしないようにご注意ください。

キャスター付きの椅子に座って使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

動作中に足を入れない。
事故やけがの原因になります。

使用に関する注意

⚠ 注意



必ず守る

使用する前に必ず各種ボタン、タイマーなどが正常にかつ安全に作動するか確認する。
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。

使い始めは「弱」から使用し、慣れてきたら好みの強さでマッサージする。
事故やけがの原因になります。

使用時以外は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。

ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜く

動かなくなったり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、AC アダプターをコンセントから抜く。

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

雷、地震、停電のときは、直ちに使用を中止し AC アダプターをコンセントから抜く。

停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

足挿入部に異物がないか、またはペットがないか確認する。

確認しないと、事故やけがの原因になります。

ローラー部に、故意に力を加えて無理やり止めない。またローラー部や本体のすき間などに手や足を入れない。

事故やけが、故障の原因になります。



禁止

本製品や操作部に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。

火災・感電・故障の原因になります。
また誤作動の原因になります。

本製品は一般家庭用のため、業務用として使用しない。

操作ボタンを2つ以上同時に押さない。
故障の原因になります。



水ぬれ禁止

本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない。

感電や故障の原因になります。

使用場所についての注意

⚠ 注意



必ず守る

本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使用する。

不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。

移動するときは、引きずらない。
床や畳を傷つけるおそれがあります。



禁止

可燃物やストーブなど火気の近くで使用したり、こたつの中で使用しない。

またたばこを吸いながら使用しない。
火災や事故、低温やけどの原因になります。



禁止

直射日光の当たるところや、35℃以上になるところでは使用・保管しない。

変形・変色・変質のおそれがあります。



禁止

布団の中や毛布などをかぶせて使用しない。

本体内部の温度が高くなり、火災や故障、けがなどの原因になります。



水場使用禁止

お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。

感電・故障のおそれがあります。

保守についての注意

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く。
守らないと、感電やけがのおそれがあります。

長時間使用しない場合は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く。

ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、
漏電火災の原因になります。



必ず守る

しばらく使用しなかったときは、本製品が正常か
つ安全に作動することを確認してから使用する。
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。



禁止

ベンジン・シンナー・アルコール・
アルカリ性洗剤・漂白剤などで拭いたり、
殺虫剤などをかけない。

変形・変色・変質のおそれや、ひび割れ・感電・
引火のおそれがあります。


使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用するこ

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす

各部のなまえとはたらき


本 体

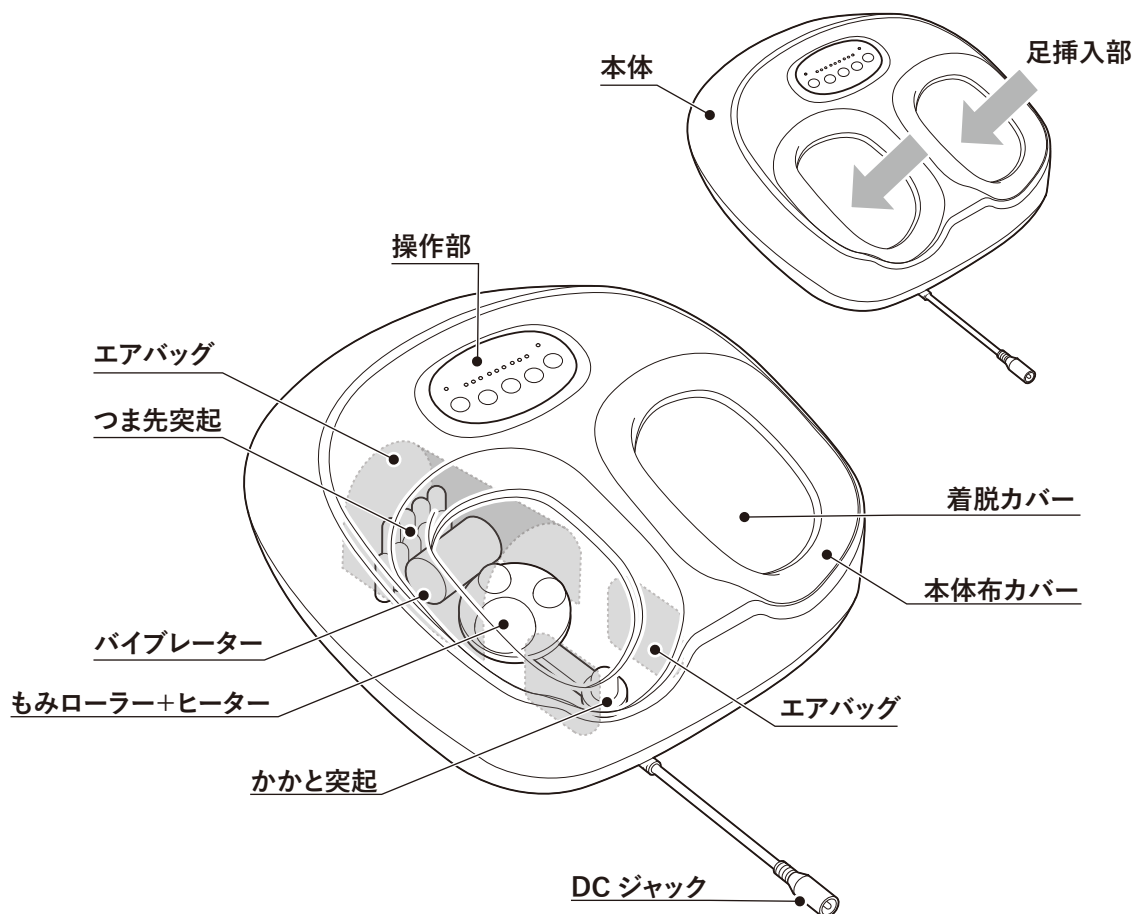

付属品

AC アダプター(型式：IVP1200-2000P)

⚠ 警告 付属の AC アダプター以外使用しない

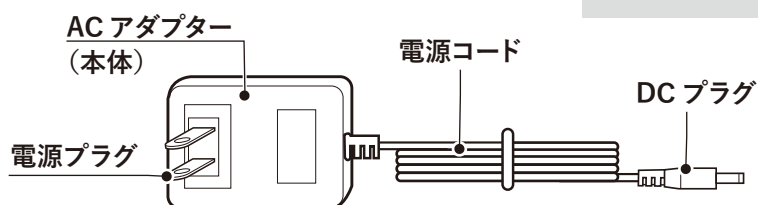

各部のなまえとはたらき


操作部

電源ランプ

AC アダプターを本体に接続すると、電源ランプが点滅し、待機状態になります。

ヒーターボタン

ヒーターの ON/OFF を切り替えられます。

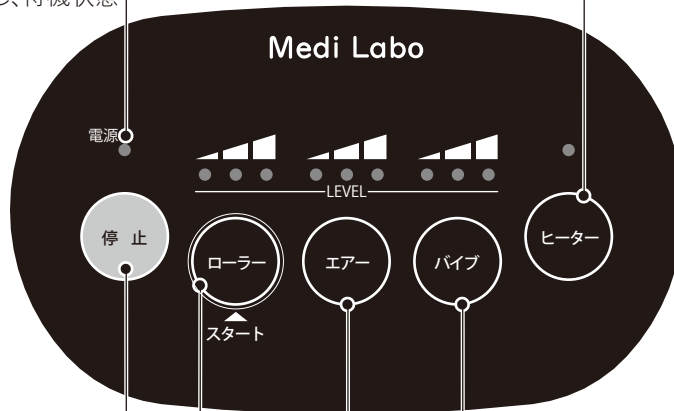

停止ボタン

すべての動作が停止します。

スタート(ローラー)ボタン

待機状態からボタンを押すと、自動コースがスタートします。
ボタンを押すごとにローラーの回転速度を3段階で切り替えられます。遅い回転からスタートします。
ローラーを OFF にすることもできます。

パイプボタン

振動の強さを3段階で切り替えられます。
弱い振動からスタートします。
パイプを OFF にすることもできます。

エアーボタン

エアーの強さを3段階で切り替えられます。
弱いエアー圧からスタートします。
エアーを OFF にすることもできます。

■コースの特長

スタート(ローラー)ボタンを押すと、自動コースが開始します。
自動コース動作中にローラーの速度、エアー・パイプの強さを3段階で調節でき、また各動作をそれぞれ OFF にすることもできます。
4つの動作をそれぞれ調節することで、お好みのマッサージを行うことができます。

ご使用の前に

1 マットなどを敷いて本体を設置する

- ・ 本体を安定した場所に置いてください。
- ・ マットは敷くことをお勧めします。製品や床面に傷がついたり、跡が残ったりするのを防ぎます。また使用中の動作音を和らげます。



2 本体布カバーや着脱カバーが破れていないか確認する

- ・ 確認後は必ず着脱カバーを本体に取り付けてから使用してください。
- ※取り付け方は P10 をご確認ください。




警告 どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、
AC アダプターを抜き、修理を依頼する。

事故やけが、低温やけどの原因になります。


3 AC アダプターの DC プラグを本体に接続し、電源プラグをコンセントに差し込む

- ・ 操作部の電源ランプが「点滅」します。

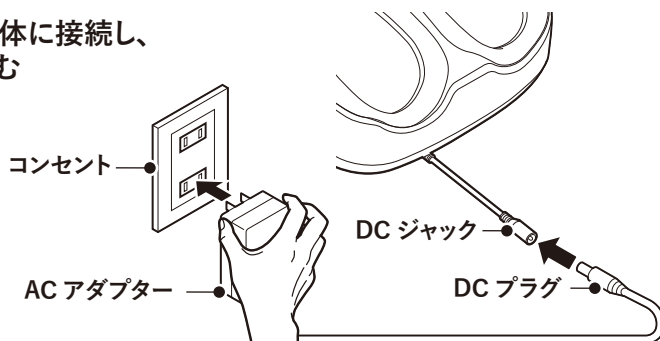

4 両足を足挿入部に入れる


- ・ 椅子などに座ってイラストのように足を入れます。
- ※ひざの角度が約 90 度になるように座ります。

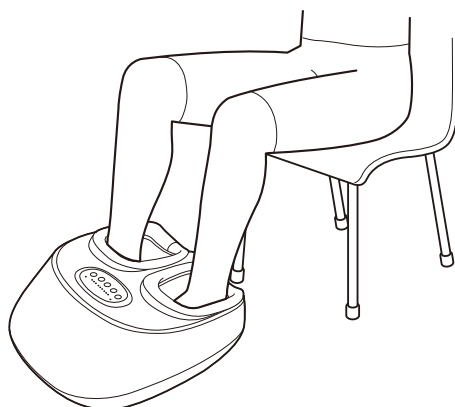

使いかた

1 スタート(ローラー)ボタンを押す

自動コースが開始します。
ローラー・エアー・パイプ・ヒーターのランプ
が1つずつ点灯します。
ローラー：遅
エアー・パイプ：弱
ヒーター：ON
で動作します。

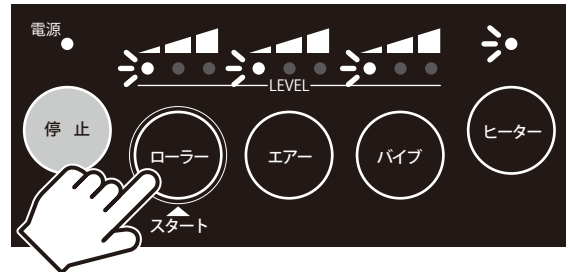


注意

使い始めはローラー速度「遅」、エアー・パイプ「弱」から使用し、慣れてきたら好みの強さでマッサージしてください。


2 ローラーの速度を変更する

ボタンを押すとローラーの速度を変更できます。
ボタンを押すごとに「遅」→「中」→「強」→「停止」が
切り替わります。

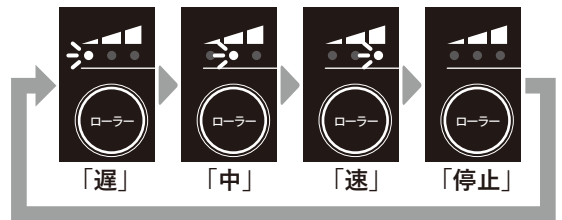


3 エアーの強さを変更する

ボタンを押すとエアーの強さを変更できます。
ボタンを押すごとに「弱」→「中」→「強」→「停止」が
切り替わります。

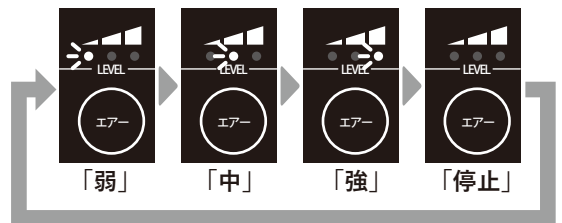

4 パイプの強さを変更する

ボタンを押すとパイプの強さを変更できます。
ボタンを押すごとに「弱」→「中」→「強」→「停止」が
切り替わります。

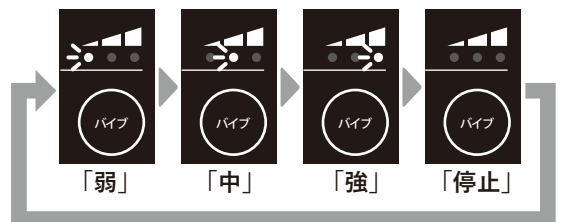


使いかた


5

ヒーター ON にする /OFF にする

ボタンを押すとヒーターの ON/OFF を変更できます。

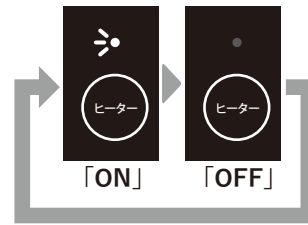

- ・もみローラー+ヒーターは土踏まず付近にあります。足裏全体が温まるものではありません。
- ※温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。

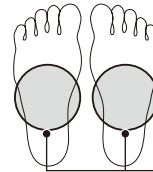

もみローラー+ヒーター

低温やけどについて

比較的低い温度(40℃以上)でも、発熱体を同じ場所に長時間当てていると、紅斑や水疱などの症状がでるやけどのことです。自覚症状がない場合もありますので十分注意してください。

● マッサージやヒーターによる温めを途中でやめるには

● 身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合は

停止ボタンを押してください。

すべての動作が停止します。

AC アダプターをコンセントから抜いてください。



注意

本製品の使用時間は1回15分以内にする。また同一箇所への連続使用はしない。
続けて使用する場合、30分以上あけて使用する。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。

6

コースが終了したら、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、本体からDCプラグを抜く

着脱カバーの取り付け・取り外し

必ず着脱カバーを取り付けた状態で使用する。

事故やけが、低温やけどの原因になります。



注意 必ず本体布カバーと着脱カバーが破れていないか確認する。

どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、AC アダプターを抜き、修理を依頼する。



事故やけが、低温やけどの原因になります。

取り付け

1 AC アダプターをコンセントから抜く


2 着脱カバーに手を入れる

- ・面ファスナーを外側／下にしてください。
- ・左右はありません。

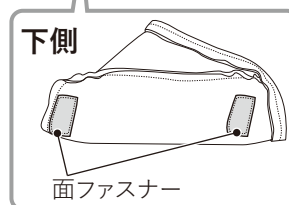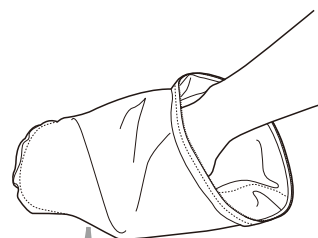

3 着脱カバーを本体に取り付ける

手を奥まで入れて、つま先／かかと部についている面ファスナーを本体布カバー側の面ファスナーに貼り付けて固定します。


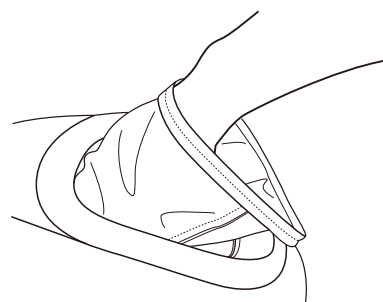


4 ファスナーを閉める

- ・ファスナーは確実に最後まで閉めてください。
- ・左右とも反時計回りでファスナーを閉めてください。

左側

右側

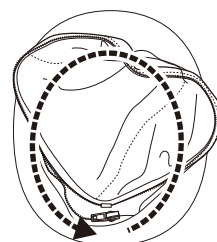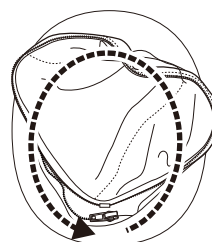

取り外し

ファスナーを外し、面ファスナーを外してから着脱カバーを引き抜く

お手入れ

次回使用時に支障がないように、お手入れを行ってください。



警告 お手入れをするときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く
また、ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない

着脱カバー


着脱カバーは取り外すことができますので、汚れたら取り外して洗濯してください。

※本体布カバーは取り外しできる構造ではありません。

無理に取り外さないでください。

※着脱カバーは色落ちする可能性がありますので、他のものと分けて洗濯してください。

- ①本体から着脱カバーを取り外します。
- ②洗濯ネットに入れ、中性洗剤を入れた洗濯機で洗ってください。
- ③風通しの良い日陰に干して、乾かしてください。

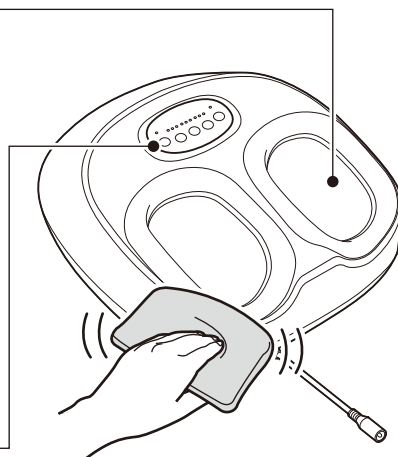

本体部・操作部

乾いたやわらかい布で拭いてください。

汚れのひどいときは、水または薄めた中性洗剤を染み込ませてよくしぼった布で拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

使用しないときは

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品に布などをかけてホコリなどがつかないようにしてください。

コンセントから AC アダプターを抜いて、コードに傷がつかないように保管してください。

使用後は汚れやホコリを、乾いたやわらかい布などできれいに拭き取ってから保管してください。

AC アダプターのコードなどは束ねず、ねじれをほどいて保管してください。

また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

長年ご使用の「多機能コンパクトフットマッサージャー」の点検を！

こんな症状はありませんか？



愛情点検

- ・ AC アダプターや電源コードが異常に熱い
- ・ 電源コードに深い傷や変形がある
- ・ 焦げ臭いにおいがする
- ・ 操作中に異常な音や振動がする
- ・ スイッチを入れても時々動作しないことがある
- ・ その他異常や故障がある

ご使用の中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、「停止」ボタンを押して電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
その後、必ずお買い上げ販売店に点検・修理をご相談ください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体のルールに従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度下記の内容をお確かめください。それでも異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店または当社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	対処方法
動作しない	コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。 本体とACアダプターが正しく接続されていない。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込んでください。
動作中に停止した	電源ランプのみが点滅 タイマーがはたらき、動作が止まっている。 すべてのランプが消灯→その後電源ランプのみが点滅 製品に大きな負荷がかかって安全装置が働いている。	タイマー機能が働き、約15分で自動停止します。1日2回を目安に、連続使用は避けてください。 連続使用を避け、しばらく経ってから、もう一度操作してください。
使用中に突然ローラーが動かなくなる	連続して長時間使用することで、モーターの温度が高くなり、安全装置が働いている。	30分以上経ってから、もう一度操作してください。
エアー / バイブ / ヒーターボタンを押しても動作しない	スタート(ローラー)ボタンを押していない。	スタート(ローラー)ボタンを押してから、エアー/バイブ/ヒーターボタンを押してください。
ヒーターが温かくない	ヒーター付近の着脱カバーを均一に伸ばしてください。 温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。 あらかじめご了承ください。	
動作音が大きい	構造上ある程度の動作音が発生します。機能などに影響はありません。	



点検後も異常がある

ただちに
使用中止



販売店に点検・修理を依頼してください

仕様

販売名／型番	多機能コンパクトフットマッサー／ YT-806
医療機器認証番号	306AGBZX00021000
医療機器分類	管理医療機器
類別／一般の名称	機械器具 77 バイブレーター／家庭用電気マッサージ器
電気定格	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	35W(電熱装置 7.5W を含む)
本体定格電圧	DC12V
本体消費電力	30W
定格時間	15 分
オートタイマー	約 15 分
外形寸法	幅 325 × 奥行き 380× 高さ 175mm
質量	約 2.5kg
専用 AC アダプター	型式：IVP1200-2000P
AC アダプターコード長さ	約 1.8m
材質	本 体：ABS 樹脂 張り地：ポリエステル、ポリウレタン
製造国	日本
医療機器製造販売元	株式会社 惣田製作所 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492
医療機器製造販売業許可番号	25B2X10001

■製品に表示されているシンボルについて

	直流マーク
---	-------

■AC アダプターに表示されているシンボルについて

	医療機器として PSE (電気用品安全法) と同等の電気安全試験に適合		家庭内使用		DC プラグ極性 センタープラス
	2 重絶縁表示		耐短絡安全 絶縁変圧器	IP20	防水・防塵 IP 保護等級

MEMO

保証とアフターサービス

※必ずお読みください

(1)保証書

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

(2)保証期間中に修理を依頼される場合(ただし縫製部品は除きます)

保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3)保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(4)補修用部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5)ご使用中にふだんと変わった状態になった場合

直ちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対にお止めください。

(6)修理・アフターサービスについてのご相談

ご転居されたり、ご贈答品などでお買い上げ販売店に修理などのご相談ができないときは、下記の「株式会社 惣田製作所 品質保証部」にお問い合わせください。

※保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理に関するご相談ならびに不明な点は、
まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

お問い合わせ
窓口

株式会社 惣田製作所 品質保証部

【受付時間】

無料 0800-600-5575

月～金(祝日を除く) 9:00～17:00

(都合によりお休みさせていただく場合がございます)

※上記電話番号に繋がらない場合は TEL:0749-22-3575 にお掛けください。

保証書

持込修理

多機能コンパクトフットマッサージャー YT-806

お買い上げ日	お客様
年 月 日	フリガナ お名前
保証期間	
お買い上げ日より 年間	様
販売店	ご住所
	☎

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお買い上げ販売店で記入を受けてください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

(1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。 (4)一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。

(2)お買い上げ後の輸送、落下などによる損傷。 (5)指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。

(3)火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。 (6)本書のご提示がない場合。

4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様にご記入いただいた保証書記載の個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

製造販売元：株式会社 惣田製作所

〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492

2024-05